



R / CAPACITACIÓN PLATAFORMA FATIGUE SCIENCE

Usuarios Manager y Supervisor




DESEMPAREJAR DISPOSITIVOS

F/S Inicio de Sesión

Ingresar a la plataforma app.fatiguescience.com


1 Ingresar usuario y contraseña

En la sección superior derecha, hacer click en los 9 cuadros y posteriormente seleccionar Readi Manage

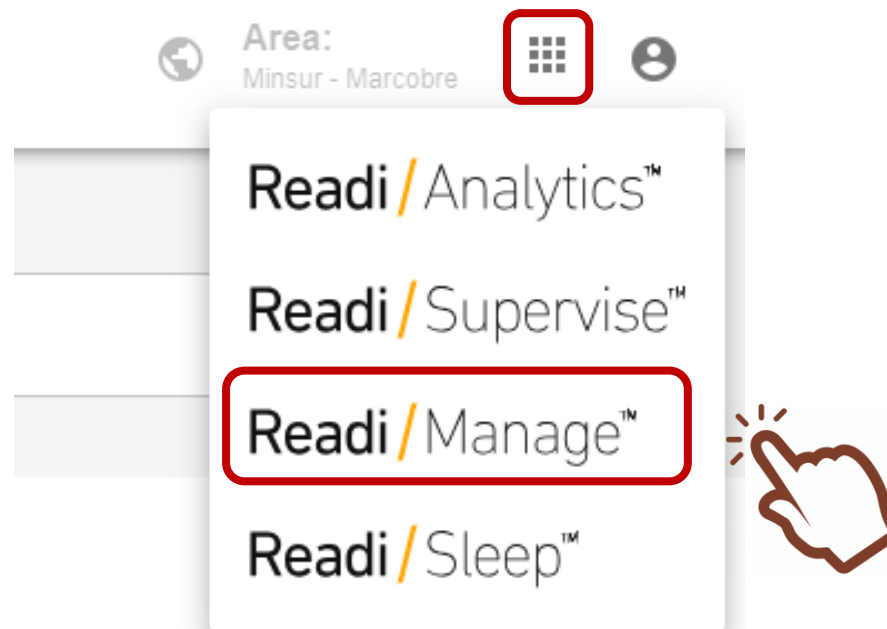

F/S Seleccionar Locación

2 En la sección superior derecha donde aparece su nombre hacer click en Manage Locations y seleccionar su locación.

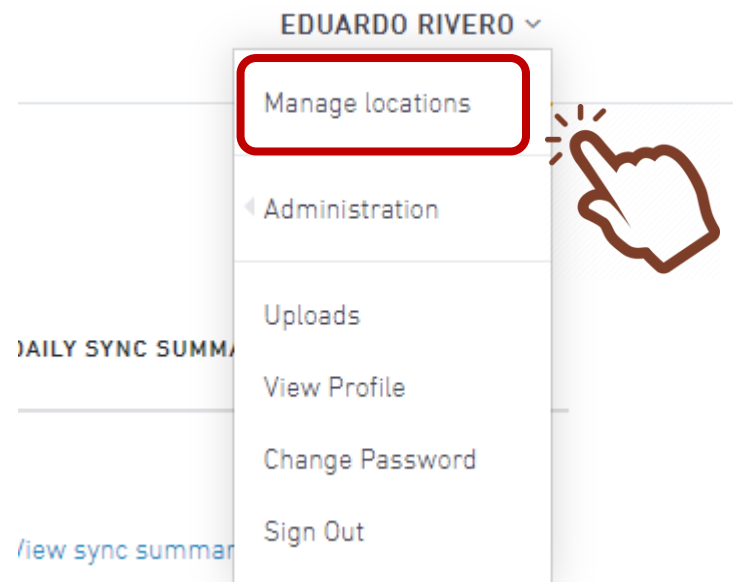

3 En la fila "Device" podrá saber el código del dispositivo vinculado. Si no aparece nada es porque no tiene un dispositivo asignado. Haga click en la sección "View History" para el trabajador que quiera desemperajerar el dispositivo.

| USERS (100) | QUESTIONNAIRES | GROUPS | DEVICE | LATEST SYNC | TOTAL DAYS | Add user |
|---|----------------|--------|-------------|----------------------|------------|--------------|
| 2023 ALEJANDRO LIU CALDERON aliuc2008@gmail.com | Not Started ▾ | | RB6AAB01791 | 2023-12-25 16:20 -05 | 206 | View history |
| 2023 ANDRES ALVAREZ AQUINO aalvareza2025@gmail.com | Not Started ▾ | | RB6AAC04165 | 2023-12-22 05:12 -05 | 266 | View history |
| 2023 Arienys Aparcana Rosas | Not Started ▾ | | | 2023-06-23 15:34 -05 | 19 | View history |

F/S Desemparejar dispositivo

4

En esta sección, hacer click en “Readiband History” para conocer todos los dispositivos que alguna vez fueron asignados. Posteriormente hacer click en “Unpair”

| DEVICES | | EVENTS | LOGINS | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|
| SYNC HISTORY (498) | | READIBAND HISTORY (2) | | | | |
| SERIAL NUMBER | PAIRED FROM | PAIRED TO | DURATION | PAIRED BY | UNPAIRED BY | |
| RB5ABH03866 | 2023-03-14 08:31 -05 | Present | 287 days | Pedro Torres Choque | | |
| RB5ABG02044 | 2022-10-30 14:59 -05 | 2023-03-14 08:29 -05 | 134 days | Pedro Torres Choque | Pedro Torres Choque | |

5

Se solicitará la confirmación. Considerar que toda la información que no haya sincronizado se perderá.

Toda reasignación de dispositivo deberá ejecutarse con el procedimiento usual.

De estar de acuerdo, hacer click en “Unpair”.

Unpair RB5ABH03866?

Are you sure you want to unpair this band from Pedro Torres Choque? Any data on the device since its last sync will be lost.

Pairing this band again can only be done with the Readiband app or Sync app on a mobile device.




**DESACTIVAR CUENTA
(DAR DE BAJA
TRABAJADORES)**

F/S Inicio de Sesión

Ingresar a la plataforma app.fatiguescience.com


1 Ingresar usuario y contraseña

En la sección superior derecha, hacer click en los 9 cuadros y posteriormente seleccionar Readi Manage

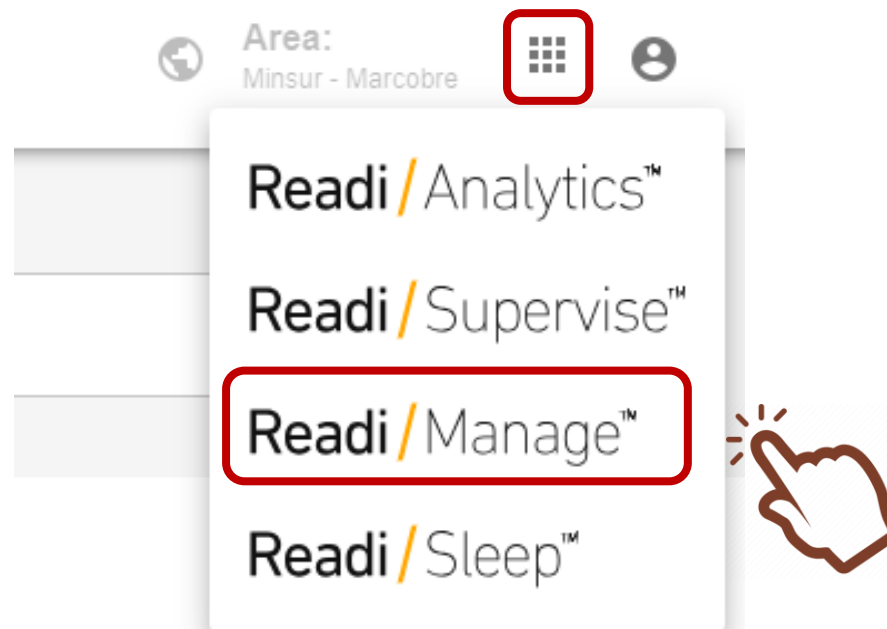

F/S Seleccionar Locación

2 En la sección superior derecha donde aparece su nombre hacer click en Manage Locations y seleccionar su locación.

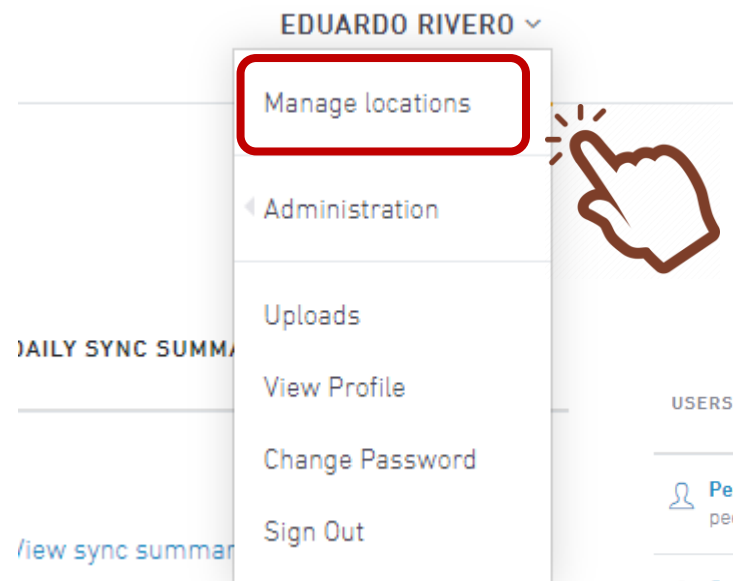

3 Aquí podrá ver la información de todos los trabajadores. Puede filtrar y verificar la última sincronización en la fila "Latest Sync". Si cuenta con dispositivos emparejados NO se podrá desactivar la cuenta (ver sección Desemparejar Dispositivos)

4 Has click en el lápiz.

| USERS (94) | QUESTIONNAIRES | GROUPS | DEVICE | LATEST SYNC | TOTAL DAYS | Add user |
|---|----------------|-----------|-------------|----------------------|------------|--------------|
| Pedro Torres Choque pedrotorresch.1991@gmail.co... ✓ | Not Started ▾ | | RB5ABH03866 | 2023-08-31 05:36 -05 | 306 | View history |
| Gaam Pier Mateo Guadalupe geanpiermateoquadalupe@g... ✓ | Not Started ▾ | GUARDIA A | RB5ABH02223 | 2023-08-24 06:06 -05 | 312 | View history |
| Teofilo Rios Airampo teofiloriosa@gmail.com Teofilo Rios ✓ | Not Started ▾ | | RB5ABH04328 | 2023-08-24 04:34 -05 | 322 | View history |

F/S Desactivar cuenta

5 Se abrirá una ventana donde se visualizarán los datos de la persona. Hacer click en “Deactivate account” (desactivar cuenta).

Posteriormente dar click en “Save” (guardar).

6 Los usuarios desactivados aparecerán con un fondo gris en su nombre. Los activos en azul.



A screenshot of the 'Edit user' form. The form contains several input fields: First name, Last name, Email, Username, Job title, and Identifier. The Location is set to 'Marcobre - Anita Tours'. Below the Location field, there is a checkbox labeled 'Deactivate account' with an information icon. This checkbox is highlighted with a red box. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'. A hand icon is pointing at the 'Save' button.